

esum

S6



Eccellenza e innovazione

Belmont

Made by hand and mind, in Japan





Eurus è il nome del dio del vento dell'est che, nell'antica mitologia, porta la pioggia ai campi di grano.

Eurus incarna la nostra convinzione di portare la qualità giapponese dei nostri prodotti in tutto il mondo.

es
ru
su





Spazio chirurgico

Compatto e flessibile

Eurus S6 è la soluzione Belmont che ti permette di risparmiare spazio, guadagnare in ergonomia e comfort anche nelle situazioni in cui è necessario un trattamento prolungato o quando lo studio è di dimensioni ridotte.

La combinazione tra il braccio fissato alla poltrona e la poltrona folding 90° offre a dentista ed assistente uno spazio di lavoro più confortevole.

Posizionando la tavoletta dottore e la tavoletta assistente dietro il paziente, l'ansia del paziente stesso viene alleggerita perché non sarà esposto alla preparazione e alla vista degli strumenti.

La bacinella può essere ruotata verso il paziente, facilitando l'operazione di risciacquo della bocca anche ai clienti più anziani.



Posizionando la tavoletta medico dietro la poltrona, la fase di preparazione degli strumenti è nascosta dalla vista del paziente durante il colloquio.



L'unità idrica ruota di 90°, rendendo possibile all'assistente di posizionarsi ad ore 3 o ad ore 4. Lo spazio creato permette quindi un ampio range di trattamenti possibili.



Il braccio della tavoletta medico è dotato di un sistema di frenaggio ad aria che ne migliora la flessibilità e la stabilità. La movimentazione della tavoletta dottore risulta così semplice e leggera, permettendo al dottore di posizionarla senza sforzo all'altezza desiderata.



Eurus S6 base mount

Relax & Comfort

Poltrona

La meccanica idraulica di precisione assicura movimenti silenziosi, fluidi e precisi per un comfort del paziente insuperabile. Il sistema a doppia articolazione del poggiatesta permette un'ampia varietà di regolazioni, con intervalli di 7,5° ciascuno, al fine di adattarsi perfettamente alla taglia del paziente: bambini, adulti o persone in carrozzina.

Un meccanismo innovativo per la regolazione in altezza del poggiatesta ne rende estremamente semplice la movimentazione riducendo lo sforzo del 50%, con grandi benefici in termini ergonomici e di comfort per il dentista e/o l'assistente.

Modello "Folding 90°":

accesso frontale facilitato, movimenti sincronizzati, poggiatesta retrattile motorizzato, posizione di lavoro per il dentista e/o assistente a partire da ore 6, accessibilità ideale per attività ortodontiche, protesiche o gnatologiche.

🚫 trendelenburg >18°.



Bracciolo mobile

La forma e le dimensioni del bracciolo sono state studiate per una perfetta impugnatura o appoggio da parte del paziente durante la seduta odontoiatrica; il meccanismo di rotazione agevola l'accesso e l'uscita dalla poltrona, in particolare per i pazienti anziani o con problemi fisici.



Comandi poltrona "Joystick"

I movimenti della poltrona possono essere comandati integralmente tramite "joystick" a pedale in modo semplice ed intuitivo, garantendo al contempo la massima igiene e la totale libertà manuale del dentista.



Poggiatesta elettrico **OPZIONALE**

Con un'estensione di 120 mm e la possibilità di regolazione della posizione di sostegno dell'Atlante, il poggiatesta motorizzato facilita il posizionamento del paziente con delicatezza e con la massima precisione e comfort. Il comando joystick a pedale permette di effettuare le regolazioni in modo totalmente igienico senza l'utilizzo delle mani.



Eurus S6 carrello

Personalizza il tuo stile



Monitor strumenti

L'interfaccia per l'utilizzatore è stata concepita per migliorare l'efficienza e ridurre lo stress durante i trattamenti. Quando uno strumento è selezionato sullo schermo appaiono unicamente le informazioni necessarie per quello strumento, in modo chiaro ed univoco.

Ampio schermo touch screen da 5,5"

Switch mode comandi poltrona/poggiatesta

Il software è già predisposto per la funzione reciprocante Wave One®.



Micromotore


La schermata di programmazione dei micromotori consente di memorizzare fino a quattro regolazioni differenti e permette un utilizzo del manipolo semplice ed intuitivo. Il numero di giri al minuto, il torque ed il senso di rotazione possono essere selezionati con un unico "touch".



Ablatore

Partendo dalla schermata di regolazione dell'ablatores, le modalità di trattamento (perio, endo, scaling) possono essere selezionati con un semplice "touch".

Più leggerezza, meno fatica

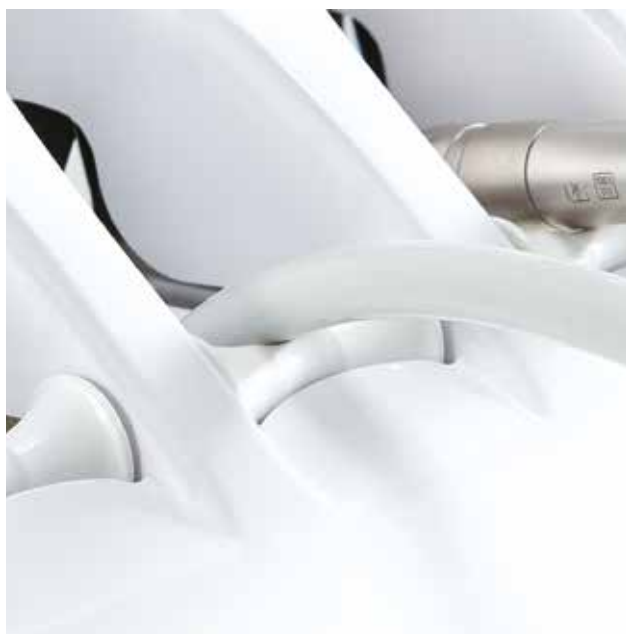

Tavoletta portastrumenti “Place Type”

Una soluzione unica e intelligente per utilizzare gli strumenti con la massima ergonomia e sicurezza.

Le guide rotanti sorreggono il peso dei cordoni e permettono al dentista e/o l'assistente di lavorare senza peso o tensioni nocive, soprattutto durante le cure e i trattamenti di lunga durata.

Con il sistema tavoletta Belmont “alla cieca” riporre gli strumenti non è mai stato così semplice: cordone e manipolo vengono guidati a ritroso nella loro sede originale senza necessità di un controllo visivo diretto. Nessun rischio di caduta degli strumenti, nessun cordone accavallato. Ideale nelle versioni a carrello.



Qualità dei dettagli

Unità idrica

Lo spazio interno del gruppo idrico è stato aumentato ed ottimizzato.

Ciò consente l'installazione opzionale del sistema automatico di risciacquo/disinfezione e/o del separatore d'amalgama, per un'igiene ai massimi livelli.

L'unità è dotata di selettore bottiglia/acqua di rete.



Indicatore luminoso

L'unità è dotata di un LED luminoso bi-colore ed elegante che indica visivamente lo stato di funzionamento o di blocco del riunito, permettendo al dentista o all'assistente di avere una percezione intuitiva ed immediata di eventuali anomalie, evitando inutili e spiacevoli perdite di tempo.

Sistema di aspirazione

Il sistema di aspirazione supplementare aumenta le prestazioni del 185%, particolarmente utile per un utilizzo chirurgico o quando è installata una doppia cannula aspirante.

Nuovo sistema di illuminazione

Per la gamma Eurus è stata sviluppata una lampada a LED di nuova generazione, già conforme alle norme ISO 9680. Con un'intensità luminosa variabile da 3000 a 28000 lux riproduce la luce naturale con una fedeltà impareggiabile.



Un sensore touchless permette di comandare le funzioni ON/OFF col semplice passaggio della mano, oltre che attivare la modalità composito gestita da due LED dedicati ed indipendenti.



Stabilità eccellente

Il braccio compensato ad alta precisione permette una movimentazione fluida della lampada per un posizionamento perfetto ed immediato nella zona desiderata, senza inutili perdite di tempo per l'operatore. Il braccio ricopre un'ampia area di lavoro per un'illuminazione ottimale sia nei trattamenti dell'arcata mandibolare che mascellare.

Pulizia e igiene migliorati



Garantire una pulizia ottimale.

Le condizioni igieniche all'interno del riunito e dei suoi componenti sono assicurate da un sistema di risciacquo idraulico (flush out).

L'unità è dotata di due programmi: uno rapido per il risciacquo tra un paziente e l'altro e uno prolungato per la disinfezione quotidiana.



Bacinella amovibile

La bacinella in ceramica è facilmente amovibile, per una pulizia semplice e puntuale.



OPZIONALE

Componenti lampada staccabili

Il vetrino coprilampada e le maniglie sono facilmente staccabili tramite una levetta a pressione e possono essere sterilizzati in autoclave.



Supporti portastrumenti autoclavabili

Tutti i supporti portastrumenti, sia per l'unità dottore che assistente, sono amovibili per una facile pulizia.



Varianti

La gamma Eurus offre soluzioni in grado di andare incontro ai bisogni di tutti gli studi odontoiatrici, mantenendo sempre intatto il suo design pulito ed ergonomico.

Per sottolineare la sua vocazione chirurgica, Eurus S6 è disponibile in due varianti senza unità idrica. Per entrambe le versioni è possibile scegliere la tavoletta medico montata alla base oppure il carrello.



S6 VacPac

Poltrona: modello Eurus 90° estensibile

Tipologia riunito: VacPac (con aspirazione)

Tavoletta strumenti: fissata alla base della poltrona e con sistema Place Type, a carrello con sistema Place Type

Illuminazione: con o senza lampada LED integrata



S6 Basic

Poltrona: modello Eurus 90° estensibile

Tipologia riunito: senza idrico e senza aspirazione

Tavoletta strumenti: fissata alla base della poltrona e con sistema Place Type, a carrello con sistema Place Type

Illuminazione: con o senza lampada LED integrata



Finiture tappezzeria



Tappezzeria Luxury



Tappezzeria Standard




Scarica le caratteristiche tecniche dei nostri skai.

Cartella Colori

Seamless

per la finitura

- Standard

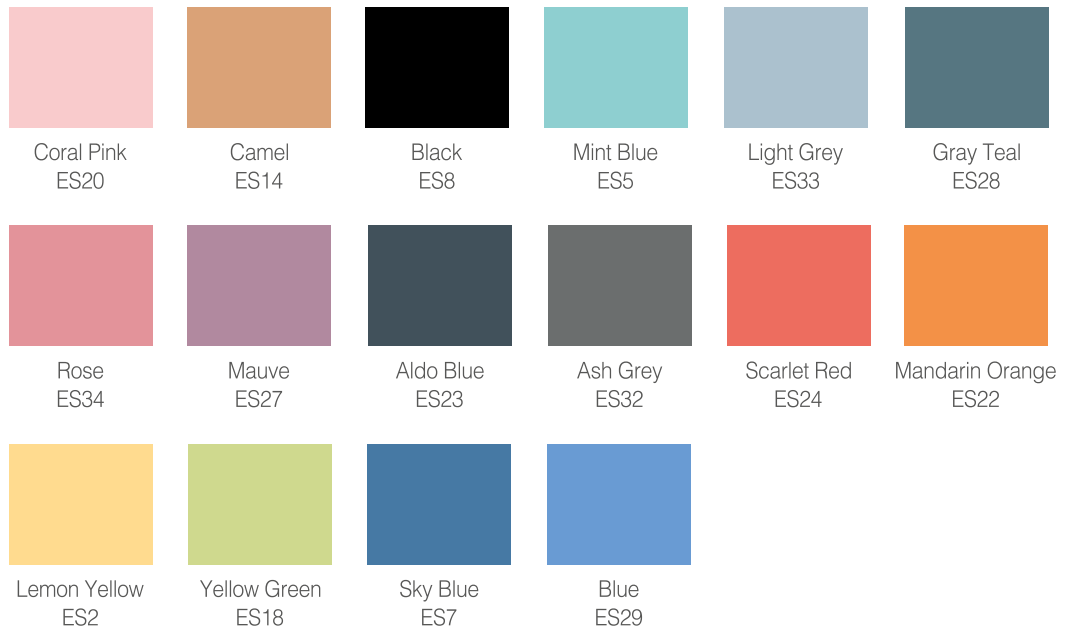

Ultraleather¹

per le finiture

- Standard
- Luxury



Colori 554 = Ultraleather PRO

Colori 291 = Ultraleather Original

1 - Extra per alcuni modelli

Comfort



Seggiolini operatore

I nuovi seggiolini Eurus completano la gamma in modo perfetto. La seduta e lo schienale sono regolabili in altezza ed inclinazione; disponibili nella versione dottore ed assistente. Materiali, forma e caratteristiche tecniche offrono al dottore/assistente il massimo sostegno e comfort anche per i trattamenti di più lunga durata. Un'estensione in altezza min/max incrementata ed ottimale permette di adattarsi alle caratteristiche fisiche e di stile di ogni utilizzatore.



AH-012D Dottore



AH-012A Assistente



DH-007 Assistente



Takara Belmont Italy s.r.l.

Sede e show room:

via Mazzacurati 4/1 - 42019 Scandiano (RE)

T. +39 0522 086 548

E. info@belmont-dental.it

www.belmont-dental.it