

# esum

S8



Eccellenza e innovazione

**Belmont**

Made by hand and mind, in Japan





*Eurus è il nome del dio del vento dell'est che, nell'antica mitologia, porta la pioggia ai campi di grano.*

*Eurus incarna la nostra convinzione di portare la qualità giapponese dei nostri prodotti in tutto il mondo.*

es  
su  
s





# Flessibilità totale

Eurus S8 è il riunito ambidestro ideale per dentisti e assistenti sia destri che mancini.

Il passaggio è semplice e richiede solo pochi minuti. Questa possibilità di modifica da destro a mancino e viceversa, rende l'unità adatta per tutte le varietà di stili operativi e aumenta quindi l'efficienza del tuo studio.

Ad esempio, la tavoletta assistente girevole, offre ai dentisti uno spazio operativo più confortevole e consente le operazioni a due o a quattro mani con la stessa facilità ed efficienza.

Il posizionamento della tavoletta medico dietro la poltrona consente agli assistenti di preparare gli strumenti durante la fase di colloquio con il paziente.



Posizione a quattro mani

Nell'operatività a quattro mani, il vassoio della tavoletta medico fornisce al dentista e all'assistente un piano comune, facilitando tutte le operazioni del workflow odontoiatrico.



Posizione a due mani

L'ampio raggio e la leggerezza di movimentazione delle due tavolette, facilitano le manovre e permettono di avere tutti gli strumenti a portata di mano, anche in caso di singolo operatore.



Eurus S8 Rod



Eurus S8 base mount

# Relax & Comfort

## Poltrona

La meccanica idraulica di precisione assicura movimenti silenziosi, fluidi e precisi per un comfort del paziente insuperabile. Il sistema a doppia articolazione del poggiatesta permette un'ampia varietà di regolazioni, con intervalli di 7,5° ciascuno, al fine di adattarsi perfettamente alla taglia del paziente: bambini, adulti o persone in carrozzina.

Un meccanismo innovativo per la regolazione in altezza del poggiatesta ne rende estremamente semplice la movimentazione riducendo lo sforzo del 50%, con grandi benefici in termini ergonomici e di comfort per il dentista e/o l'assistente.

Modello "Contour": altezza ottimale di regolazione minima della seduta; capacità di carico fino a 200 kg.

🚶 trendelenburg >18°.



### Bracciolo mobile

La forma e le dimensioni del bracciolo sono state studiate per una perfetta impugnatura o appoggio da parte del paziente durante la seduta odontoiatrica; il meccanismo di rotazione agevola l'accesso e l'uscita dalla poltrona, in particolare per i pazienti anziani o con problemi fisici.



OPZIONALE

### Comandi poltrona "Joystick"

I movimenti della poltrona possono essere comandati integralmente tramite "joystick" a pedale in modo semplice ed intuitivo, garantendo al contempo la massima igiene e la totale libertà manuale del dentista.



OPZIONALE

### Poggiatesta motorizzato

Con un'estensione di 120 mm e la possibilità di regolazione della posizione di sostegno dell'Atlante, il poggiatesta motorizzato facilita il posizionamento del paziente con delicatezza e con la massima precisione e comfort. Il comando joystick a pedale permette di effettuare le regolazioni in modo totalmente igienico senza l'utilizzo delle mani.





Eurus S8 Rod



# Personalizza il tuo stile

## Monitor strumenti

L'interfaccia per l'utilizzatore è stata concepita per migliorare l'efficienza e ridurre lo stress durante i trattamenti. Quando uno strumento è selezionato sullo schermo appaiono unicamente le informazioni necessarie per quello strumento, in modo chiaro ed univoco.



Ampio schermo  
touch screen da 5,5"

Switch mode comandi  
poltrona/poggiatesta

Il software è già predisposto per la  
funzione reciprocante Wave One®.



### Micromotore

La schermata di programmazione dei micromotori consente di memorizzare fino a quattro regolazioni differenti e permette un utilizzo del manipolo semplice ed intuitivo. Il numero di giri al minuto, il torque ed il senso di rotazione possono essere selezionati con un unico "touch".



### Ablatore

Partendo dalla schermata di regolazione dell'ablatores, le modalità di trattamento (perio, endo, scaling) possono essere selezionati con un semplice "touch".



## Libertà di movimento

---

### Belmont Rod System Versione Sprido

L'estensione dei cordoni dell'innovativo sistema Belmont Rod System permette al dentista di curare il paziente utilizzando i manipoli con facilità, qualunque sia il posizionamento della faretra. I cordoni sono leggeri e flessibili riducendo considerevolmente lo stress sulla mano e sul polso del dentista durante le ore di lavoro.



### Cordoni "long Reach"

La particolare configurazione delle aste di sostegno e la lunghezza dei cordoni di ben 900 mm permette al dentista o all'assistente di trattare ogni paziente con facilità sia da posizione laterale che posteriore della poltrona, adattandosi perfettamente ad ogni stile e tipo di cura.



### Supporto cordoni orientabile

La speciale guida rotante montata sulla sommità dell'asta permette l'orientamento laterale dei cordoni durante l'utilizzo degli strumenti, riducendo frizione ed attrito e rendendo i movimenti del dentista e/o dell'assistente agili ed ergonomici da qualunque distanza o posizione.

### Regolazione di tensione

Grazie all'esclusivo sistema Belmont\*, la tensione dell'asta a supporto dei cordoni è regolabile individualmente da un valore zero ad uno massimo, per adattarsi al meglio al peso di ogni strumento ed eliminare l'effetto tensione dalle mani dell'operatore durante l'utilizzo dei manipoli.



\*patent pending

# Più leggerezza, meno fatica

## Tavoletta portastrumenti “Place Type” Versioni a cavi pendenti

Una soluzione unica e intelligente per utilizzare gli strumenti con la massima ergonomia e sicurezza.

Le guide rotanti sorreggono il peso dei cordoni e permettono al dentista e/o l'assistente di lavorare senza peso o tensioni nocive, soprattutto durante le cure e i trattamenti di lunga durata.

Con il sistema tavoletta Belmont “alla cieca” riporre gli strumenti non è mai stato così semplice: cordone e manipolo vengono guidati a ritroso nella loro sede originale senza necessità di un controllo visivo diretto. Nessun rischio di caduta degli strumenti, nessun cordone accavallato. Ideale nelle versioni a carrello.





# Qualità dei dettagli

## Unità idrica

Lo spazio interno del gruppo idrico è stato aumentato ed ottimizzato.

Ciò consente l'installazione opzionale del sistema automatico di risciacquo/disinfezione e/o del separatore d'amalgama, per un'igiene ai massimi livelli.

L'unità è dotata di selettore bottiglia/acqua di rete.



### Indicatore luminoso

L'unità è dotata di un LED luminoso bi-colore ed elegante che indica visivamente lo stato di funzionamento o di blocco del riunito, permettendo al dentista o all'assistente di avere una percezione intuitiva ed immediata di eventuali anomalie, evitando inutili e spiacevoli perdite di tempo.

### Sistema di aspirazione

La seconda valvola supplementare aumenta le prestazioni di aspirazione del 185%. Questo sistema è particolarmente utile per un utilizzo chirurgico o quando è installata una doppia cannula aspirante.

**OPZIONALE**

### Vacuum line Clean System

L'uso quotidiano del sistema integrato di disinfezione previene la comparsa di residui nelle cannule d'aspirazione e aiuta a mantenere costante la forza dell'aspirazione stessa.



# Nuovo sistema di illuminazione

Per la gamma Eurus è stata sviluppata una lampada a LED di nuova generazione, già conforme alle norme ISO 9680. Con un'intensità luminosa variabile da 3000 a 28000 lux riproduce la luce naturale con una fedeltà impareggiabile.



Un sensore touchless permette di comandare le funzioni ON/OFF col semplice passaggio della mano, oltre che attivare la modalità composito gestita da due LED dedicati ed indipendenti.



## Stabilità eccellente

Il braccio compensato ad alta precisione permette una movimentazione fluida della lampada per un posizionamento perfetto ed immediato nella zona desiderata, senza inutili perdite di tempo per l'operatore. Il braccio ricopre un'ampia area di lavoro per un'illuminazione ottimale sia nei trattamenti dell'arcata mandibolare che mascellare.

# Pulizia e igiene migliorati



## Garantire una pulizia ottimale.

Le condizioni igieniche all'interno del riunito e dei suoi componenti sono assicurate da un sistema di risciacquo idraulico (flush out).

L'unità è dotata di due programmi: uno rapido per il risciacquo tra un paziente e l'altro e uno prolungato per la disinfezione quotidiana.



## Bacinella amovibile

La bacinella in ceramica è facilmente amovibile, per una pulizia semplice e puntuale.



## Componenti lampada staccabili

Il vetrino coprilampada e le maniglie sono facilmente staccabili tramite una levetta a pressione e possono essere sterilizzati in autoclave.



## Supporti portastrumenti autoclavabili

Tutti i supporti portastrumenti, sia per l'unità dottore che assistente, sono amovibili per una facile pulizia.



# Varianti

La gamma Eurus offre soluzioni in grado di andare incontro ai bisogni di tutti gli studi odontoiatrici, mantenendo sempre intatto il suo design pulito ed ergonomico.

Per sottolineare la sua vocazione modulare e flessibile, Eurus S8 è disponibile in due varianti senza unità idrica. Per entrambe le versioni è possibile scegliere la tavoletta medico nelle tre versioni: ROD, montata alla base oppure il carrello.



## S8 VacPac

Poltrona: modello Contour

Tipologia riunito: VacPac (con aspirazione)

Tavoletta strumenti: fissata alla base della poltrona e con sistema Place Type, a carrello con sistema Place Type

Illuminazione: con o senza lampada LED integrata



## S8 Basic

Poltrona: modello Contour

Tipologia riunito: senza idrico e senza aspirazione

Tavoletta strumenti: fissata alla base della poltrona e con sistema Place Type, a carrello con sistema Place Type

Illuminazione: con o senza lampada LED integrata



# Finiture tappezzeria



Tappezzeria Luxury



Tappezzeria Standard




Scarica le caratteristiche tecniche dei nostri skai.

# Cartella Colori

## Seamless

per la finitura


- Standard

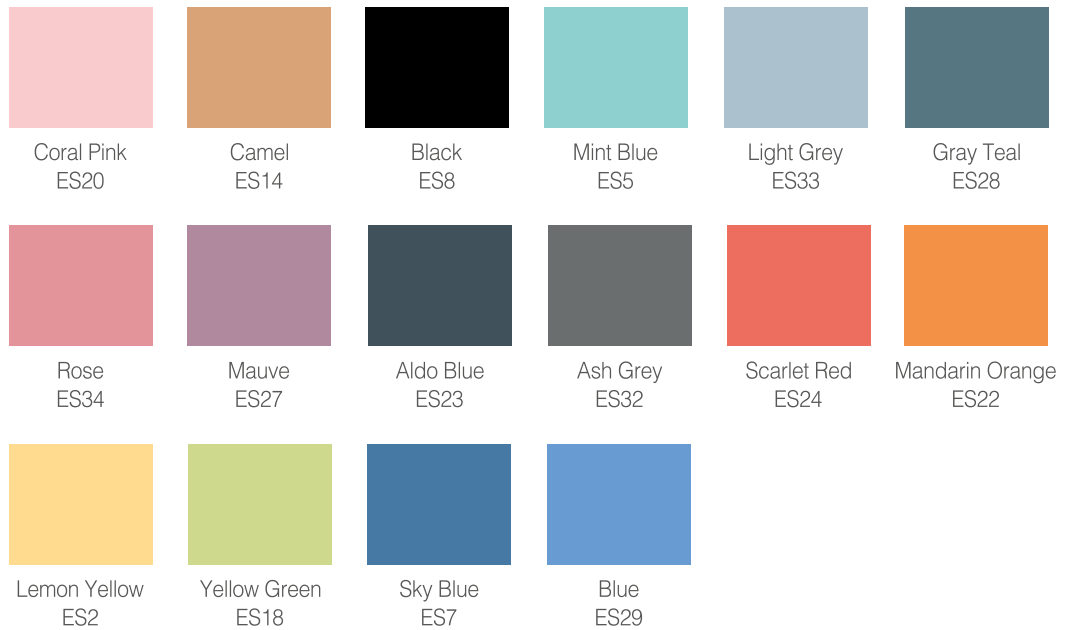

## Ultraleather<sup>1</sup>

per le finiture

- Standard
- Luxury

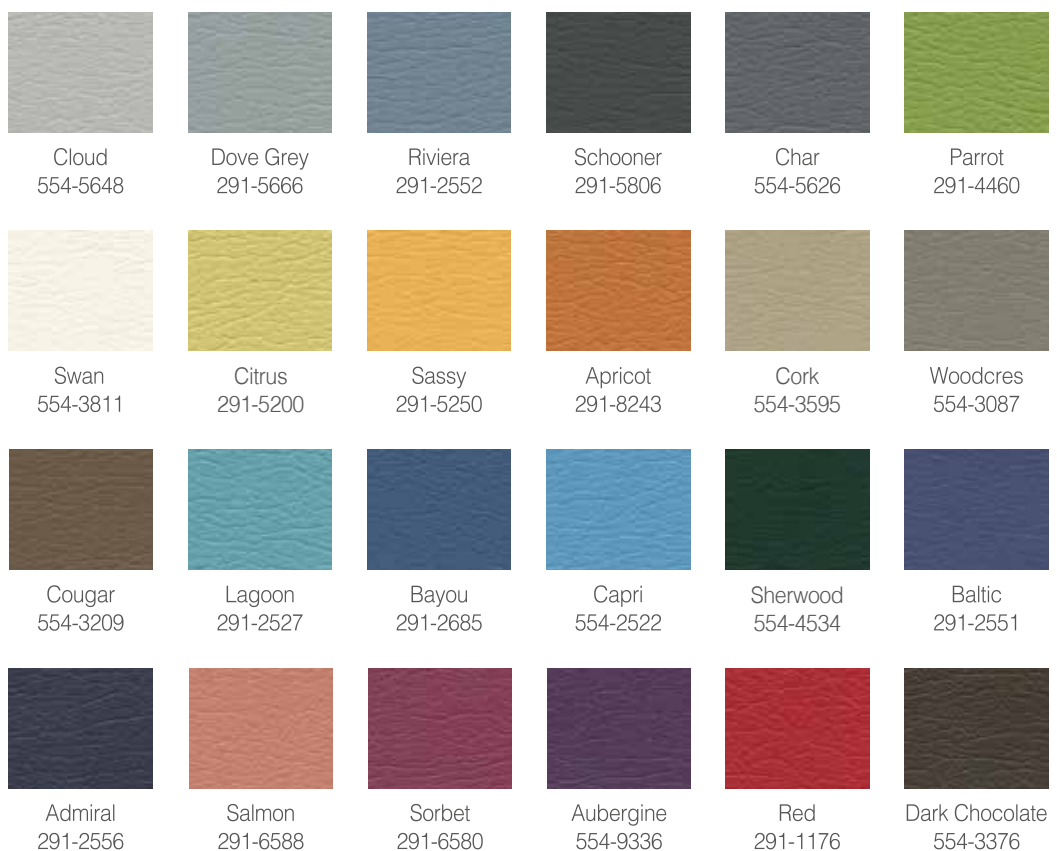

Colori 554 = Ultraleather PRO

Colori 291 = Ultraleather Original

1 - Extra per alcuni modelli

# Comfort



## Seggiolini operatore

I nuovi seggiolini Eurus completano la gamma in modo perfetto. La seduta e lo schienale sono regolabili in altezza ed inclinazione; disponibili nella versione dottore ed assistente. Materiali, forma e caratteristiche tecniche offrono al dottore/assistente il massimo sostegno e comfort anche per i trattamenti di più lunga durata. Un'estensione in altezza min/max incrementata ed ottimale permette di adattarsi alle caratteristiche fisiche e di stile di ogni utilizzatore.



AH-012D Dottore



AH-012A Assistente



DH-007 Assistente





**Takara Belmont Italy s.r.l.**

**Sede e show room:**

via Mazzacurati 4/1 - 42019 Scandiano (RE)

T. +39 0522 086 548

E. [info@belmont-dental.it](mailto:info@belmont-dental.it)

[www.belmont-dental.it](http://www.belmont-dental.it)